

Lit Hill-Rom® 900

Efficacité et simplicité



Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom



Fiabilité éprouvée

Fruit de plus de 85 ans d'expérience, le lit Hill-Rom 900 présente de nombreuses innovations technologiques permettant aux soignants de dispenser des soins de qualité aux patients. Inspirée et guidée par les contributions de plusieurs générations de soignants, la société Hill-Rom a ainsi mis au point le lit Hill-Rom 900 afin de simplifier et d'améliorer les soins prodigués. La fiabilité du lit Hill-Rom 900 est reconnue dans les établissements du monde entier, c'est-à-dire que les soignants de votre hôpital pourront compter sur des années de performance.

La qualité des soins dépend du temps que les soignants ont à consacrer à leurs patients. Le lit Hill-Rom 900 offre des fonctionnalités optimales d'une complexité minimale, ce qui permet aux soignants de consacrer moins de temps et d'énergie à faire fonctionner le lit et plus de temps aux tâches essentielles, comme la mobilisation plus sûre des patients.

Efficacité exceptionnelle, donc plus de temps à consacrer aux soins du patient

Le lit Hill-Rom 900 a été conçu dans un souci d'efficacité fonctionnelle, en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et la sécurité, aussi bien pour les patients que pour les soignants.



Commandes intuitives

Les commandes à symboles intuitifs facilitent l'accès aux fonctions du lit. Les fonctions conviviales simplifient les tâches quotidiennes du soignant, tout en améliorant l'autonomie et le confort du patient. Ainsi, les soignants passent moins de temps à faire fonctionner le lit et plus de temps à s'occuper de leurs patients.



EasyChair™ par simple pression

Le positionnement EasyChair™ en option permet aux patients de s'asseoir rapidement dans une position confortable. À l'aide d'une commande unique, les soignants peuvent également replacer les patients en position basse ou à plat en toute sécurité.



Facilité de nettoyage et de désinfection

Les éléments du plan de couchage en stratifié haute pression (HPL) sont amovibles pour un nettoyage efficace. Les surfaces lisses et les panneaux amovibles facilitent le nettoyage chimique ou à la vapeur, ainsi que la décontamination.



Maniabilité du lit améliorée

La cinquième roue centrale, en option, offre une conduite et une rotation améliorées, particulièrement utiles dans les espaces confinés. Située au niveau du centre de gravité du lit, elle réduit la surface requise au sol lors de la rotation du lit.

La mobilité intuitive contribue à une plus grande autonomie du patient et à une rééducation plus rapide



Les études cliniques publiées démontrent qu'une mobilité précoce et réalisée en toute sécurité accélère la rééducation des patients.¹⁻³

Les problèmes cliniques liés à une mobilisation réduite, comme les escarres, la détérioration de la masse musculaire, la fragilisation des os, la constipation et la dépression nuisent au rétablissement du patient.⁴⁻⁶ La mobilisation des patients bénéficie non seulement à la fonction physique, mais aussi au bien-être émotionnel et social.¹⁻³

La mobilisation est souvent compliquée et risquée pour les patients et les soignants.⁷ Les chutes sont les incidents secondaires les plus fréquents dans les unités d'hospitalisation des patients adultes,⁸ et affectent aussi bien les patients que leurs soignants.⁹⁻¹⁴

Les établissements de santé font face à des difficultés croissantes pour mettre en place un environnement sûr et confortable pour les patients et les soignants, non seulement pour la protection et le bien-être de l'établissement, mais également pour minimiser le coût des soins et éviter tout risque de litige. Dans cette optique, le lit Hill-Rom 900 présente des fonctions ergonomiques conçues pour améliorer la sécurité et l'efficacité de la mobilisation du patient.

1. Journal of Clinical Nursing, 2013. Outcomes of inpatient mobilization. Beatrice J Kalisch, Soohee Lee and Beverly W Dabney
2. Patient mobilization. Best practices improve health outcomes and ensure safety for patients and staff alike. Patient Safety & Quality Healthcare. Mars 2011. <http://psqh.com/patient-mobilization>
3. Diserens Karin et al, 2006. Early Mobilisation after Stroke, Review of the Literature
4. Nigam Y, et al. Effects of bed rest 3: musculoskeletal and immune systems, skin and self-perception. Nurs. Times. 2009; 105:18-22.
5. Knight J, et al. Nurs Times. 2009;105(22):24-27
6. Approximately 1 in 5 acute care patients will develop a pressure ulcer (Vanderwee K, Clark M, Dealey C, Gunningberg L, Deffoor T. Pressure ulcer prevalence in Europe: a pilot study Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2007, 13(2): 227-235)
7. Patient Safety & Quality Healthcare. Patient Mobilization. Best practices improve health outcomes and ensure safety for patients and staff alike. By Barbara Peterson, RN, BSN, MPH, and Betty Bogue, RN, BSN. 2011
8. Currie LM. Agency for Healthcare Research and Quality, 2008
9. Hitcho EB, et al. J Gen Intern Med. 2004 ;19(7):732-739
10. Murray GR, et al. J Am Geriatr Soc. 2007;55(4):577-582
11. Wong, C. A., et al. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2011;37(2):81-87
12. Pompeii LA, et al. Am J Ind Med. 2009;52(7):571-578.
13. Occupational Safety & Health Administration. Safe patient handling programs: effectiveness and cost savings. 2012.
14. Oliver D. Clin Risk. 2007;13(5):173-181

Mobilisation plus sûre et plus simple du patient



Mobilité facilitée

Le lit Hill-Rom 900 est doté de fonctions visant à aider les patients à travers les différentes étapes de la mobilité, de la rotation à la position assise, puis la sortie du lit et la position debout.



Remise à plat du plan de couchage

La fonction de remise à plat en option permet de déplacer le lit à partir de n'importe quelle position articulée vers sa position la plus basse et la plus à plat, à seulement 38 cm* du sol.



Sortie du lit du patient

Appuyez simplement sur le bouton de sortie du lit en option pour positionner le lit de sorte à assurer une sortie du lit plus sûre pour le patient.




Mobilisation assurée par une bonne prise en main

Intégrées sur les demi-barrières, les poignées offrent une bonne prise en main. Elles permettent aux patients de sortir du lit sans risque et de se lever par eux-mêmes.

Garantie d'un environnement plus sûr

La veilleuse de nuit intelligente* en option du lit Hill-Rom 900 est verte quand le lit est dans sa position la plus basse. Elle éclaire au sol la zone où le patient sort du lit pour réduire le risque de chutes.

Si le lit n'est pas dans sa position la plus basse, la veilleuse de nuit est orange.

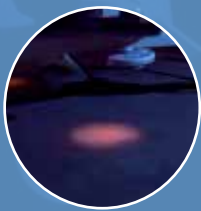

Alarme de frein (en option)*

Elle avertit les soignants si les freins ne sont pas engagés correctement.



Indicateur de position basse (en option)*

Avertit les soignants si le lit n'est pas dans sa position la plus basse.



Pédale de commande de hauteur variable bilatérale (en option)*

Permet d'utiliser les fonctions tout en gardant les mains libres.



Réduction du risque de piégeage du patient

Le dispositif réglable de maintien du matelas s'ajuste à la largeur du matelas, ce qui réduit le risque de piégeage du patient et permet au lit de s'adapter à une grande variété de surfaces.



Position d'urgence (en option)*

Positionne le patient à plat en déclive en cas d'urgence.



Fiabilité éprouvée

Qualité Hill-Rom

Le système à hauteur variable du lit Hill-Rom 900 est conçu pour garantir une grande fiabilité. Deux points de fixation, situés sur le cadre de base et sur le plan de couchage, permettent de répartir de façon égale le poids sur le plan de couchage pour une stabilité latérale optimale.



Une simulation assistée par ordinateur de la pression exercée sur les bras de levage a permis de déterminer la conception, le matériau et la solidité de ces composants essentiels.

Conçue pour un service efficace. La conception simple du lit, associée aux capacités de service étendues de Hill-Rom, permet à votre établissement de santé de réaliser un retour sur investissement maximal. Le lit Hill-Rom 900 offre un accès facile et sûr aux principaux composants afin de simplifier les opérations de maintenance de routine. Seuls cinq outils sont nécessaires pour couvrir toutes les procédures de maintenance.



Notre système de fixation breveté permet de retirer et de remplacer horizontalement les roulettes depuis le côté du lit, pour un remplacement et un nettoyage simples et rapides.



Les télécommandes sont soumises à un contrôle qualité complet comprenant des tests de pulvérisation, d'usage et de chute.

La gamme Hill-Rom 900

Les lits de la série 900 sont le produit phare de Hill-Rom dans l'environnement des soins de court séjour. Ils possèdent la même plateforme que celle utilisée sur les lits de tous les autres secteurs de soins. Ceci facilite la formation du personnel, déjà familier et à l'aise avec la plateforme Hill-Rom, et permet une gestion plus efficace des pièces de rechange dans les établissements de santé.

Bien que chaque lit soit conçu pour répondre aux besoins spécifiques d'un environnement médical précis, Hill-Rom a créé des fonctions et des caractéristiques communes à tous ses lits pour une plus grande facilité d'utilisation, ce qui se traduit par une réduction de la formation interne des soignants et davantage de temps consacré aux patients. La facilité d'utilisation aide également à réduire les erreurs des soignants, ce qui améliore la gestion du risque dans les établissements de santé.

Demi-barrières

- Le **rail de verrouillage possède un mécanisme d'auto-abaissement rapide et fluide** avec un système d'amortissement pouvant être activé à une seule main afin d'abaisser le lit sans perturber le patient, et permettant un accès rapide aux patients dans les situations d'urgence
- Les **indicateurs d'angle faciles à lire** mettent en évidence l'ajustement du relève-buste, ce qui aide les soignants à positionner le patient
- Les **indicateurs de position des hanches aident à placer** correctement le patient dans son lit, ce qui améliore le confort du patient et lui évite de changer fréquemment de position
- Disponible **avec ou sans commandes du rail de verrouillage intégrées** pour plus de flexibilité



Déverrouillage du rail d'une seule main



Le rail de verrouillage n'occupe que 4 cm sur le côté du lit



Indicateurs d'angle facile à lire



Rail de verrouillage latéral, 3/4, en métal

- Le **dispositif de verrouillage double du rail latéral** est conçu pour éviter tout abaissement involontaire des rails
- Aide précieuse pour les soignants, **les poignées de préhension rétractables** peuvent être élevées et sécurisées en un geste pour apporter un appui ferme au patient lorsqu'il sort de son lit
- **L'indicateur de l'angle Line-Of-Site™** aide à positionner le patient à l'angle de soulèvement souhaité
- Les **fonctions destinées au soignant doivent être activées séparément** avant de pouvoir être utilisées, afin de réduire le risque d'activation involontaire
- Les **commandes conviviales au lit** s'adaptent aux différents besoins du soignant et encouragent l'autonomie du patient



Le double verrouillage accroît la sécurité



Les panneaux du plan de couchage faciles à nettoyer contribuent à une plus grande hygiène



L'indicateur Line-Of-Site facilite le positionnement du patient

Surfaces compatibles pour le Hill-Rom 900

Transforme les résultats via la prévention et le traitement des escarres.

Hill-Rom propose des solutions visant à prévenir les escarres et à encourager la cicatrisation.



Mouvements synchronisés du lit

Plusieurs articulations sur le lit assurent un confort et une position optimale pour le patient tout en réduisant la friction, le cisaillement et la compression abdominale.

Le relève-buste pivotant aide à réduire la pression exercée sur la section abdominale du patient pour faciliter la respiration.

Il est facile d'améliorer la répartition de la pression et le repositionnement du patient grâce aux fonctions électriques décline/proclive.

Intelligent AutoContour™

Le dispositif intelligent AutoContour n'empêche pas seulement le patient de glisser vers le pied du lit lorsqu'il actionne le relève-buste. Il permet également au soignant ou à son patient de contrôler facilement l'angle entre le relève-buste et le soutien des cuisses pour un confort maximal.

En association avec la gamme de surfaces thérapeutiques, le lit Hill-Rom 900 peut aider à gérer le risque d'escarre.

La gamme de surfaces thérapeutiques Hill-Rom comprend une grande variété de surfaces motorisées, hybrides et en mousse.

Les surfaces thérapeutiques comportent une grande variété de fonctions et de caractéristiques techniques, notamment les capteurs I-mmersion™ et le système de gestion avancée du microclimat Microclimate Management™.

La combinaison des surfaces dotées des options d'articulation du cadre disponibles avec le Hill-Rom 900 est conçue pour améliorer la rééducation du patient et contribue à la prévention et au traitement des escarres.

Pour consulter la gamme complète de surfaces Hill-Rom, rendez-vous sur :

www.hill-rom.com

NP 150
Viscoélastique*



AccuMax
Quantum™ VPC*



ClinActiv™ ⊕
MCM™ *



* Représente un échantillon des surfaces disponibles

Total Room Solution™

De Hill-Rom

Hill-Rom propose une solution entièrement intégrée à la pièce permettant de réaliser des soins sûrs, dans le confort et la dignité. Les systèmes de levage de notre marque Liko se combinent aux lits Hill-Rom pour aider les patients/ résidents et les soignants à relever les défis de mobilité dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. Les meubles se déclinent en ensembles fonctionnels et flexibles, venant compléter chaque lit hôtelier ou hospitalier : tables de chevet, tables à manger au lit, armoires, commodes, tables, chaises, éléments muraux et étagères.



Hill-Rom OnDemand

Outil de gestion en ligne des surfaces thérapeutiques

Suivi et commande en ligne pratiques pour gérer à tout moment vos locations de matériel. Hill-Rom OnDemand offre une ressource en ligne facile d'utilisation pour vous aider à gérer efficacement vos besoins en surfaces thérapeutiques. Consultez la page Hill-Rom OnDemand sur : <http://ondemand.hill-rom.com>




Service

Hill-Rom Service - Un fournisseur unique pour répondre à tous vos besoins

Pour optimiser les performances de nos produits sur toute leur durée de vie, nous intégrons les paramètres de maintenance dès l'étape de recherche et développement. En tant que fournisseur dédié, nous vous aidons à améliorer la productivité et l'efficacité en optimisant l'entretien de votre équipement. Cela permet ainsi de réduire les temps d'immobilisation et les coûts de réparation, tout en assurant le respect des réglementations ainsi que des exigences réglementaires et de qualité.

Hill-Rom propose une large gamme de services professionnels, effectués par des techniciens certifiés, afin de répondre à vos exigences en matière d'entretien.

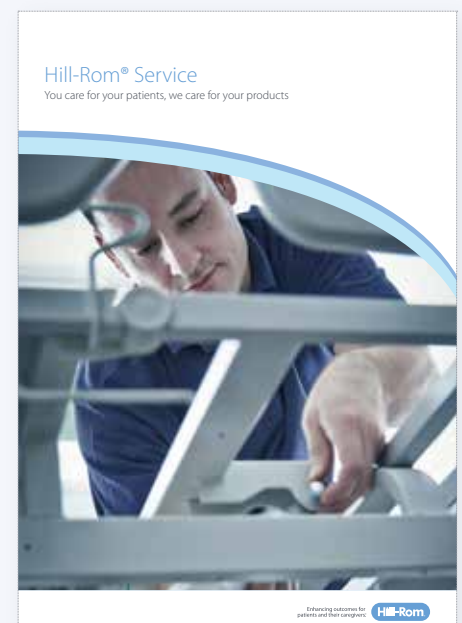

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale, leader sur le marché, qui emploie près de 10 000 salariés dans le monde. Nous travaillons en étroite collaboration avec des professionnels de la santé dans plus de 100 pays. Nous nous focalisons sur les solutions de soins aux patients qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : **Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Surveillance et diagnostic patient, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des complications respiratoires.** Partout dans le monde, les employés, les produits et les programmes de Hill-Rom n'ont qu'un seul objectif : **Chaque jour, à travers le monde, nous améliorons les résultats pour les patients et les soignants.**



Hill-Rom est convaincu que la mobilisation précoce des personnes pour les aider à retrouver leur autonomie améliore leur qualité de vie à l'hôpital et au domicile.

Le lit Hill Rom 900 est destiné à être utilisé dans des environnements de soins intensifs, de soins de court séjour et de soins ambulatoires pour des patients pesant ≥ 40 kg, mesurant ≥ 146 cm et présentant un IMC ≥ 17 .

Classe I

Fabricant : Hill-Rom S.A.S. – BP 14 Zi du Talhouët 56330 Pluvigner France

La surface Hill-Rom NP 150 aide à prévenir les escarres chez les patients présentant un risque nul ou un risque faible à modéré, dont le poids se situe entre 30 kg et 150 kg et dont la taille est égale ou supérieure à 1,46 m dans différents environnements de soins de santé.

Classe I

Fabricant : Hill-Rom S.A.S. – BP 14 Zi du Talhouët 56330 Pluvigner France

Associé aux protocoles de pivotement recommandés, la surface AccuMax Quantum VPC est un système thérapeutique de redistribution de la pression qui aide à la prévention et au traitement des escarres de stade I, II, III et IV chez les patients présentant un risque modéré de développer des escarres et dont le poids et la taille minimum sont respectivement de 40 kg et 1,46 m.

Classe I. Fabricant : Hill-Rom Inc, 1069 State Route 49E, Batesville, Indiana, 47006 – 9167 États-Unis

Représentant en Europe : Hill-Rom S.A.S. - BP 14 Zi du Talhouët 56330 Pluvigner France

La surface ClinActiv+ MCM a été conçue pour aider à prévenir et à traiter les escarres de stade I, II, III et IV chez les patients présentant un risque faible à très élevé, dont le poids et la taille minimum sont respectivement de 30 kg et de 1,46 m dans différents environnements de soins de santé.

Classe IIa. Organisme notifié : LNE/G-Med CE0459

Fabricant : Hill-Rom S.A.S. – BP 14 Zi du Talhouët 56330 Pluvigner France

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux.

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Doc. N° : 5FR129311-02, 21 novembre 2017

Certains produits/options ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur nos produits et services, contactez votre représentant Hill-Rom local ou consultez notre site Web à l'adresse suivante :

www.hill-rom.com

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom